

manuthera[®] 242

Премиальный стол для мобилизации



Manuthera 242 это не просто стол –

Это уникальный и разносторонний вспомогательный инструмент
для самых требовательных профессионалов


LOJER[®]

manuthera242.com

Как работает Manuthera 242?


Тракция шейного отдела

Доступ к боковым поверхностям суставов и связок шейного отдела позвоночника. Лечит и снимает напряжение в зажатой и напряженной области шеи и плеч.

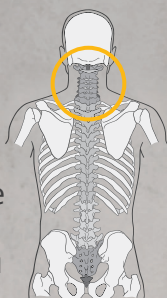


Манипуляция грудного отдела позвоночника

Манипуляция и регулировка грудного отдела позвоночника для улучшения диапазона движения и функций. Наклон для помощи гравитации, сгибание и боковой изгиб с помощью Manuthera обеспечивают более конкретное и комфортное лечение. Используйте динамические движения для проработки мягких тканей и получения доступа к более глубоким тканям

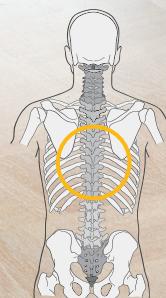

Поясничный отдел


Плавная флекссионная дистракция с боковым изгибом, ротацией и декомпрессией дает безграничные 3D-возможности для лечения поясницы, межпозвоночных дисков, таза и крестца. Добавьте инверсию, чтобы расширить угол воздействия, усилить эффект, воздействуя как на поверхностные, так и на более глубокие слои ткани.

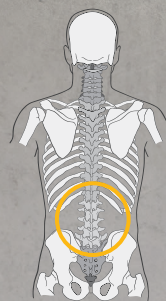


Узнайте больше!

Доступ к видео с признанными экспертами!

Получите доступ к бесплатной видеоплатформе, отсканировав QR-код ниже, и узнайте, как извлечь максимум пользы из многофункциональных возможностей Manuthera. Зарегистрируйтесь, и вы получите доступ к сотням видеороликов, в которых различные практикующие врачи делятся своим опытом работы с Manuthera 242 и успехами, достигнутыми ими в различных случаях с пациентами, совершенно бесплатно.

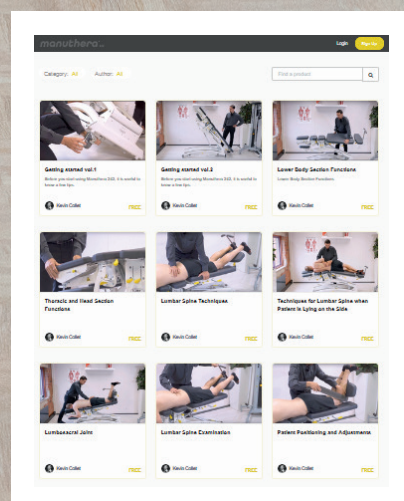


Размеры Manuthera 242

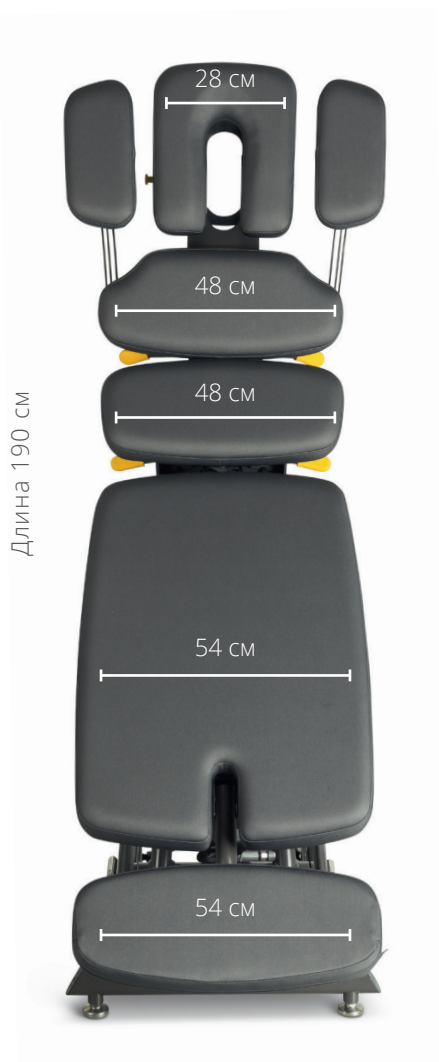

Технические характеристики	
Диапазон регулировки высоты	51–106 см
Вес	170 kg
Наклоны	Электропривод 52°/32°
Привод высоты	Электропривод
Ротация ножной части	Да
Углы регулировки нижней части (3D)	+21.5°/макс -40° (вертикально), 0..18° (горизонтально)
Углы регулировки грудного отдела (3D)	+15°/-13° (вертикально), 0..18° (горизонтально)
Блокировка положения грудного отдела и нижней части	Да
Колеса	Да
Безопасная рабочая нагрузка (SWL)	150 кг
Функции «drop»	Drop с тракцией
Защитный бортик	Да
Блокировка электрических функций	Автоматически (2 ч.) или в ручном режиме
Обивка	Антимикробная
Отверстие для лица U- формы, с заглушкой	Да
Манипуляционная рукоятка	Да
Страна происхождения	Финляндия
CE сертификат	Да
Производитель	Lojer Oy

FENNIAPRIZE 17

HONOURABLE MENTION

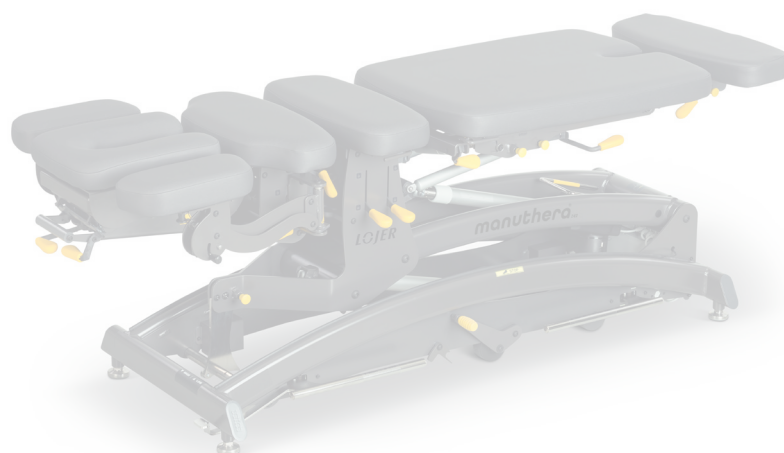

© Lojer Group 2025. Все права защищены. Представительство в России – ООО «Лойер Медикал» Россия, Москва, ул. Верейская 29 стр. 134
Тел. + 7 495 269 06 95 | cis@lojer.com | www.lojer.com
История компании началась с 1919 года. Известная ранее как Vammalan Kopera ja, компания занималась ремонтом техники.
Сегодня Lojer Oy - крупнейший производитель медицинской мебели в Скандинавии, поставщик оборудования в 115 стран мира.